

Teste pou kont ou lakay ou

Kijan pou ou itilize tès iHealth COVID-19 nan pou kont ou

1

2

3

4

Etap 1: Prepare Materyèl ou


Tès ou gen ladan li:



• Yon kat tès COVID-19




• Yon Tib ki genyen likid tès la

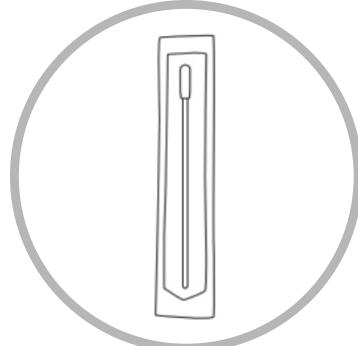

• Yon tij koton

Lè ou pare pou kòmanse ak tès la, ouvri ti posh Tès Kat COVID-19 nan papye aliminyum

Etap 2: Kolekte echantyon ou

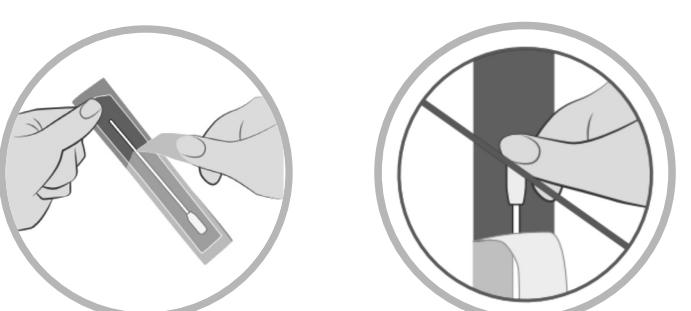

- Retire tij koton an nan pake a PA MANYEN TÈT TIJ LA A DWÈT OU
- Kenbe pake tij koton an pou itilize apre




Tou Dousman mete tout pwent tij koton an (jeneralman 1.5 oswa 2 cm) nan twou nen ou.

Ak timoun, pi lwen ou kapab mete tij koton an nan twou nen yo kapab pi piti pase 2 cm, epi ou kapab bezwen yon dezyèm moun pou kenbe tèt timoun nan pandan wap fè prelevman.

Frote tij koton an andedan twou nen an nan yon sèk omwen 5 fwa.

Fè li fèm epi Dousman – pwan omwen 15 segonn pou kolekte echantyon an epi asire w ou kolekte tout likid ki nan nen an ak tij koton an.

Itilize MENM TIJ KOTON AN, refè menm pwosesis la nan lòt twou nen an.

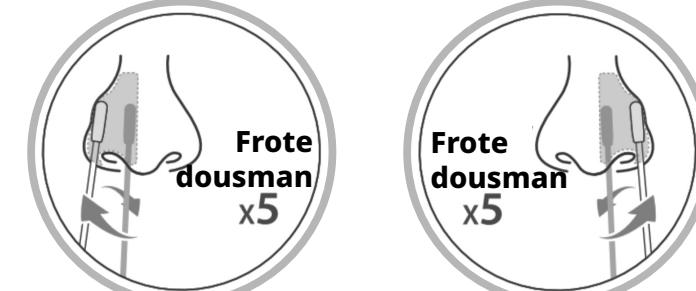

Ou kapab jwenn yon rezulta tès ki pa korèk si ou pa kolekte yon bon kantite echantyon ak tij koton an.


Etap 3: Trete echantyon an




- Frapé tib la tou Dousman, tou dwat sou yon tab epi vire gwo bouchon oranj lan pou ouvri.



Vire pwent tij koton an nan fon tib la omwen 15 fwa.

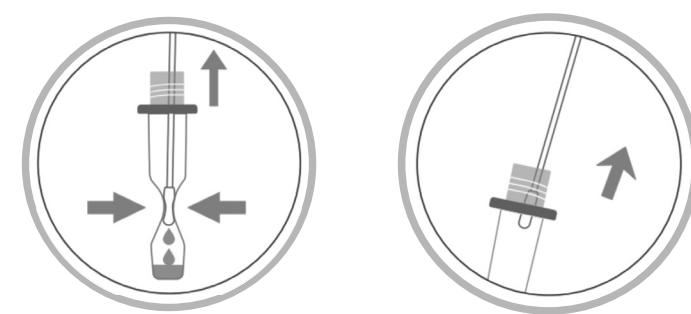

- Peze sou kote tib la pou ou kapab pran yon bon kantite echantyon sou tanpon an.
- Ou kapab pa genyen ase echantyon materyèl pou fè tès la byen si w pa peze tij koton an.

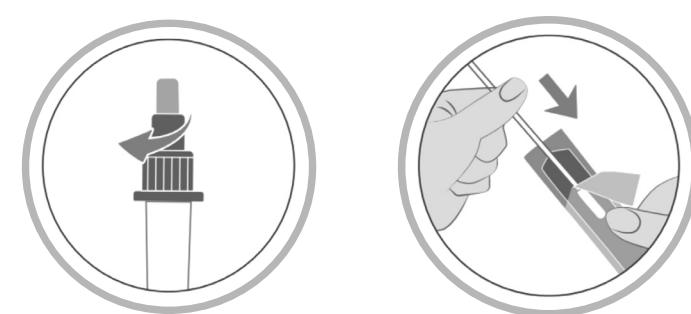

Retire tij koton an epi remete gwo bouchon oranj lan nan tib la.


Remete tij koton an nan pake a pou ou ka jete li.

Etap 4: Ajoute echantyon an



- Kounye a echantyon an nan tib la.
- Pou w teste echantyon an, vise ti bouchon blan tib la.
- Ajoute 3 gout echantyon nan Pòt Echantyon Kat Tès COVID-19 lan.
- Revise ti bouchon blan an. Tann 15 minit pou rezulta ou pare.
- Kou ou fin ajoute echantyon an nan Pòt echantyon an, kòmanse timè a tou swit.
- Rezulta ap pare nan 15 minit, epi lap eksپire apre 30 minit.
- Yon fo rezulta negatif oswa yon fo rezulta pozitif kaoab rive si yo li rezulta anvan 15 minit oswa apre 30 minit.

Entèprete Rezulta

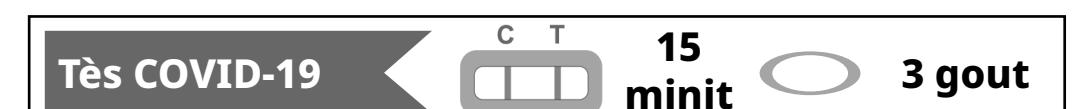

Rezulta Pozitif



Remake liy T a gen dwa pa fonsé.
Yon rezulta POZITIF dwe montre TOULEDE liy yo ni liy C ni liy T. Yon rezulta pozitif vle di moun nan pozitif pou COVID-19.

Ale nan mass.gov/COVIDselftest pou konnen sa pou fè. Ou dwe kontakte founisié sante ou sou rezulta pozitif ou, sitou si ou genyen pwoblèm sante ki mete ou a risk lòt gwo maladi serie ak COVID-19.

Rezulta envalid: Si pa genyen OKENN LIY, oswa si genyen YON SÈL LIY tès la pa reyisi. Wap oblige reteste ak yon nouvo tès kit. Si nouvo rezulta ou a envalid tou, Al teste nan yon sant pou teste oswa kontakte yon pwofesyonèl swen sante.

Rezulta Negatif



Yon rezulta NEGATIF ap montre SELMAN yon liy C. Yon rezulta negative vle di moun nan sipoze negative pou COVID-19.

Yon rezulta negatif pa eskli nèt COVID-19. Si ou genyen sentòm COVID-19, sitou si ou konen ou te frekante yon moun ki genyen COVID-19, ale teste nan yon sant kote yo fè tès oswa refè tès la apre 1-2 jou epi konsilte yon pwofesyonèl swen sante.

Jete twous tès la: Apre tès la fin fèt, jete tout materyèl tès la nan poubèl.